

# PRAXISORIENTIERT

LOW-LEVEL-LASERTHERAPIE  
IN DER VETERINÄRMEDIZIN –  
FÜR ALLE FELLE



EINE FÜR ALLES – ALLES IN EINEM!

LASERDUSCHE **21+**  
POWERWIN

- MEHR POWER
- NEUES DESIGN
- PRÄZISIONS-SOFTWARE
- ERWEITERTE FREQUENZREIHEN
- FI-BÄNDER (AUTORUN) UND SWEEPS
- MOBILER EINSATZ
- GARANTIERTE QUALITÄT



## IHR VORTEIL

EIN THERAPIEGERÄT  
FÜR VIELE EINSÄTZE

Hervorragende

Kosten-Nutzen-Rechnung

Neue Kunden - Treue Kunden

MEHR UMSATZ



Schnelle Amortisation

- Ein Therapiegerät für unterschiedlichste Indikationen
- Einfache Handhabung bei Tieren fast aller Arten und Größen
- Großflächige Lasertherapie – Laserpunktur – Laserfrequenz-Therapie
- Wechseladapter für Behandlungen von glatter Haut, kurzem Fell, langem und dichtem Fell sowie Laserpunktur
- Mobiler Einsatz – leichtes, kompaktes Therapiegerät – In- und Outdoor

**MKW**

LASERSYSTEM

[www.mkw-laser.de](http://www.mkw-laser.de)

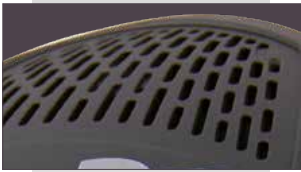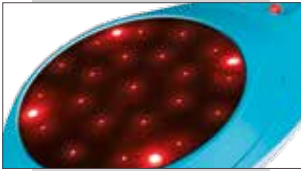

## MEHR POWER<sup>+</sup>

Die neue Laserdusche PowerTwin21+ verdoppelt die Laserleistung auf 2.100 mW (21 x 100 mW). Somit erreicht dieses Laser-Modell auf einer Behandlungsfläche von weiterhin 55 cm<sup>2</sup> eine der höchsten Leistungsdichten unter Low Level Lasergeräten. Das Laserlicht kann tiefer in das zu behandelnde Gewebe eindringen, somit verkürzt sich die Therapiezeit!

## NEUES DESIGN<sup>+</sup>

Kompletter Relaunch des Gehäusedesigns ermöglicht ergonomisch einfache Handhabung. Die Kühlung der Hochleistungs-Laserdioden mittels Ventilatoren und Kühlrippen gewährleisten eine effiziente Behandlung.

## PRÄZISIONS - SOFTWARE<sup>+</sup>

Individuell einstellbare Laserparameter. Frequenzreihen vorprogrammiert. **Frequenzbänder (AUTORUN!) und Sweeps.** Für Spezialanwendungen individuell einstellbar. Neben der Betriebsart CW (Dauerstrich) und dem bewährten Multifrequenzspektrum sind zusätzliche Frequenzprogramme (z.B. Nogier-, Bahr-, Solfeggio- und Reinerfrequenzen) voreingestellt. Weitere Frequenzen können frei gewählt und auf 20 Speicherplätze programmiert werden. Behandlungsdosis, Betriebsart sowie Therapiezeit werden am Farbdisplay angezeigt.

## WECHSELADAPTER<sup>+</sup>

Für hygienisches und schnelles Arbeiten. Der Clou: Ein Gerät für verschiedene Anwendungen – per Click in einen Laserkamm umrüstbar. Für unterschiedliche Felltypen. Mit dem Kammapapter behandeln Sie selbst Tiere mit langem und dichtem Fell. Für die Laserpunktur steht ein Punktheadapter zur Verfügung.

## FÜR MOBILEN EINSATZ<sup>+</sup>

Mobiler Einsatz, leicht, kompakt, bequeme Behandlung am Tier. (*In- und Outdoor*) – für den netzunabhängigen Einsatz steht eine leistungsstarke PowerBank zur Verfügung.

## GARANTIERTE MKW-QUALITÄT<sup>+</sup>

MKW LASERSYSTEM – mehr als 30 Jahre Erfahrung – Innovation und Know How ! MKW bietet hochrangige Spezialisten in vielen Fachgebieten, eine Facebook Gruppe für Anwender sowie regelmäßige Webinar- und Seminarangebote.

- <sup>+</sup> **Booklet** (Pocket-Guide) Behandlungsbuch mit Indikationsbeispielen wird mitgeliefert.



# INTERESSIERT?

Informationsmaterial anfordern unter [www.mkw-laser.de](http://www.mkw-laser.de)

**MKW**  
LASERSYSTEM