

POWER TWIN 21

XPS

LOW-LEVEL-LASERTHERAPIE
FÜR ALLE FELLE



LASERTHERAPIE AUF HÖCHSTEM NIVEAU




- Präzisions-Software mit Bluetooth
- 4-farb Display mit höchster Kontraststärke
- 9 Frequenzreihen vorprogrammiert
- 5 Sweeps und 16 FI-Bänder im Autorun
- Innovatives Design – Praxisorientiert
- Optional:
Behandlungs-Software
MKW LASER PRAXIS

NIE WAR LASERN SO EINFACH

- Lasertherapie – flächig oder punktuell
- Ideal für Laserfrequenztherapie
- Mit Wechseladaptern für Felltiere aller Art
- Mobiler Einsatz – In- und Outdoor
- Perfektes Handling – bester Praxiskomfort
- Optionale Behandlungs-Software via Tablet und Bluetooth

www.mkw-laser.de

MKW
LASERSYSTEM

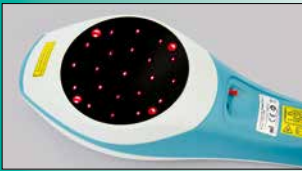

VIEL POWER

Mit 2.100 mW (21 Laserdioden x 100 mW) erreicht dieses Laser-Modell auf einer Behandlungsfläche von 55 cm² eine der höchsten Leistungsdichten unter Low Level Lasergeräten. Das Laserlicht kann tief in das zu behandelnde Gewebe eindringen. Die Behandlungszeiten sind kurz.

INNOVATIVES DESIGN

Das Gehäusedesign ermöglicht ergonomisch einfache Handhabung. Die Kühlung der Hochleistungs-Laserdioden mittels Ventilatoren und Kühlrippen gewährleisten eine effiziente Lasertherapie. Ein großes, kontrastreiches Farbdisplay ermöglicht die einfache Einstellung aller Parameter – Laserleistung, Betriebsart, Therapiezeit sowie Behandlungsdosis werden am Farbdisplay mit höchster Kontraststärke angezeigt.

PRÄZISIONS-SOFTWARE

Individuell einstellbare Laserparameter. 9 bewährte Frequenzreihen, 16 FI-Bänder (Autorun) sowie 5 Sweeps (Autorun) vorprogrammiert. Weitere Frequenzen können frei gewählt und abgespeichert werden.

WECHSELADAPTER

Für hygienisches und schnelles Arbeiten. Der Clou: Ein Gerät für verschiedene Anwendungen – per Click in einen Laserkamm umrüstbar. Für unterschiedliche Felltypen. Mit dem Kammadapter behandeln Sie selbst Tiere mit langem und dichtem Fell. Für die Laserpunktur steht ein Punktadapter zur Verfügung.

FÜR MOBILEN EINSATZ

Mobiler Einsatz, leicht, kompakt, bequeme Behandlung am Tier. (In- und Outdoor) – für den netzunabhängigen Einsatz steht eine leistungsstarke PowerBank zur Verfügung.

MKW LASER PRAXIS

Das Programm „MKW LASER PRAXIS“ ist eine Behandlungs-Software, speziell entwickelt für die tiermedizinische Praxis. Einfachste Touchscreen-Steuerung über ein zugehöriges Samsung Tablet. Mit Kunden- und Patienten Manager, Therapie-Steuerung, Therapie-Dokumentation, umfangreiche Frequenz-Database mit der Möglichkeit eigene Frequenzen, Frequenzreihen sowie Indikationen mit Therapieprogrammen anzulegen. Nie war Lasern so einfach.

BLUETOOTH

Jetzt mit Bluetooth Schnittstelle zur Verbindung mit Behandlungs-Software „MKW LASER PRAXIS“

BOOKLET

Pocket-Guide Laserfrequenzen – Behandlungsbuch mit über 100 Indikationsbeispielen wird mitgeliefert.

GARANTIERTE MKW-QUALITÄT

MKW LASERSYSTEM – mehr als 35 Jahre Erfahrung – Innovation und Know How! MKW bietet hochrangige Spezialisten in vielen Fachgebieten, eine Facebook Gruppe für Anwender sowie regelmäßige Webinar- und Seminarangebote.

INTERESSIERT?

Informationsmaterial anfordern unter www.mkw-laser.de

MKW Lasersystem GmbH | Landstraße 67 | D-76547 Sinzheim/Baden-Baden
Tel: 0 72 21 - 9 88 391-2 | Fax: 0 72 21 - 9 88 393 | mkw@mkw-laser.de | www.mkw-laser.de

MKW
LASERSYSTEM

POWER TWIN 21

XP5



LASER PRAXIS

DIE SOFTWARE
ZUR LASERTHERAPIE



LASERTHERAPIE MEETS BLUETOOTH




- Einfachste Steuerung via Bluetooth
- Touchscreen-Bedienung
- Kunden- und Patientenmanager
- Frequenz-Datenbank mit Kurzprofilen
- Therapieanleitungen für viele Indikationen
- Programme frei wählbar
- Und vieles mehr....

www.mkw-laser.de

MKW
LASERSYSTEM

MKW LASER PRAXIS – ALLES WAS GEHT UND MEHR

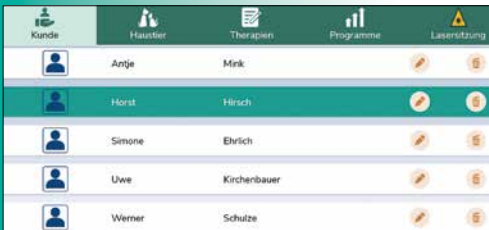

Kunde	Hausarzt	Therapeuten	Programme	Lasersitzung
Anja	Mink			
Horst	Hirsch			
Simone	Ehrlich			
Uwe	Kirchenbauer			
Werner	Schulze			

KUNDEN-UND PATIENTENMANAGER


Laserbehandlungen und Therapieverläufe werden automatisch gespeichert, dem Tier zugeordnet und können bewertet, kommentiert und mit Fotos dokumentiert werden.



Standardprogramme	Sweep-Programme	FI-Band-Programme	Indizierte Programme
CW	1		
Multi-Frequency	1		
Alpha	1		
Bahr 1-7			

FREQUENZ-DATENBANK

9 Frequenzreihen, 5 Sweeps und 16 FI-Bänder sind voreingestellt. Eigene Frequenzen, Sweeps, FI-Bänder können problemlos erstellt und einer Indikation zugeordnet werden. Einfacher Aufbau einer eigenen Indikations-, bzw. Therapie- und Frequenz-Datenbank.

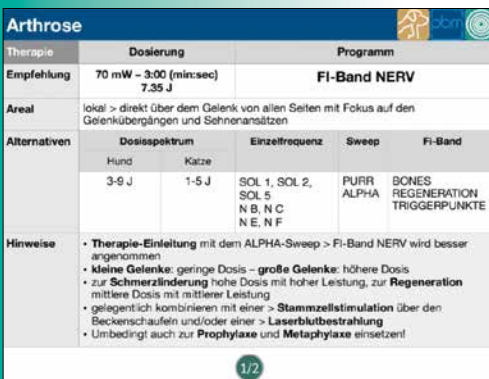

Therapie	Dosierung	Programm								
Empfehlung	70 mW - 3:00 (min:sec) 7.35 J	FI-Band NERV								
Areal	lokal > direkt über dem Gelenk von allen Seiten mit Fokus auf den Gelenkübergängen und Sehnenansätzen									
Alternativen	<table border="1"><thead><tr><th>Dosisspektrum</th><th>Einzel Frequenz</th><th>Sweep</th><th>FI-Band</th></tr></thead><tbody><tr><td>Hund 3-6 J</td><td>Katze 1-5 J</td><td>SOL 1, SOL 2, SOL 5 N B, N C N E, N F</td><td>PUPR ALPHA BONES REGENERATION TRIGGERPUNKTE</td></tr></tbody></table>	Dosisspektrum	Einzel Frequenz	Sweep	FI-Band	Hund 3-6 J	Katze 1-5 J	SOL 1, SOL 2, SOL 5 N B, N C N E, N F	PUPR ALPHA BONES REGENERATION TRIGGERPUNKTE	
Dosisspektrum	Einzel Frequenz	Sweep	FI-Band							
Hund 3-6 J	Katze 1-5 J	SOL 1, SOL 2, SOL 5 N B, N C N E, N F	PUPR ALPHA BONES REGENERATION TRIGGERPUNKTE							
Hinweise	<ul style="list-style-type: none">• Therapie-Einleitung mit dem ALPHA-Sweep > FI-Band NERV wird besser angenommen• kleine Gelenke: geringe Dosis – große Gelenke: höhere Dosis• zur Schmerzänderung hohe Dosis mit hoher Leistung, zur Regeneration mittlere Dosis mit mittlerer Leistung• gelegentlich kombinieren mit einer > Stammzellstimulation über den Beckenschaukeln und/oder einer > Laserblutbestrahlung• Umbedingt auch zur Prophylaxe und Metaphylaxe einsetzen!									

THERAPIEEMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Behandlungsempfehlungen, Tipps sowie zusammengefasste Fachliteratur zu über 70 Indikationen. Regelmäßige Programm-Updates spielend leicht via WLAN downloaden. Back-Ups werden automatisch in einer Cloud gesichert.



Standardprogramme	Sweep-Programme	FI-Band-Programme	Indizierte Programme
KT Alopecie	1		
KT Anal fissur	1		
KT Arthrose Spezial	1		
KT Arthrose/Arthritis	1		

INDIKATIONEN HINZUFÜGEN

Die vorhandene Indikationsliste kann zusätzlich vom Therapeuten erweitert und mit vorhandenen oder neu erstellten Programmen verbunden werden um das Potenzial der Low-Level-Lasertherapie vollständig auszuschöpfen.

ZWEI STARKE PARTNER:

POWER
TWIN **21**
XP5

+



INTERESSIERT?

Informationsmaterial anfordern unter www.mkw-laser.de

MKW Lasersystem GmbH | Landstraße 67 | D-76547 Sinzheim/Baden-Baden
Tel: 0 72 21 - 9 88 391-2 | Fax: 0 72 21 - 9 88 393 | mkw@mkw-laser.de | www.mkw-laser.de

MKW
LASERSYSTEM