

POWER TWIN 21 XPS

THÉRAPIE PAR LASER DE FAIBLE
NIVEAU POUR LA MÉDECINE HUMAINE



LA THÉRAPIE LASER À SON MEILLEUR



- Logiciel de précision avec Bluetooth
- Affichage à 4 couleurs avec un contraste maximal
- 9 séries de fréquences préprogrammées
- 5 balayages et 16 bandes FI en exécution automatique
- Conception innovante
- axé sur la pratique

LE LASER - PLUS FACILE QUE JAMAIS

- Thérapie laser - traitement de zones ou de points isolés
- Idéal pour la thérapie par fréquence laser
- Avec adaptateurs interchangeables
- Manipulation parfaite - facilité d'utilisation optimale

www.mkw-laser.de

MKW
LASERSYSTEM



BEAUCOUP DE PUISSANCE

Avec 2 100 mW (21 diodes laser x 100 mW), ce modèle de laser atteint l'une des densités de puissance les plus élevées de tous les appareils à laser de faible niveau sur une zone de traitement de 55 cm². La lumière laser peut pénétrer profondément dans le tissu à traiter. Les temps de traitement sont courts.



CONCEPTION INNOVANTE

La conception du boîtier permet une manipulation ergonomique simple. Le refroidissement des diodes laser haute performance par des ventilateurs et des ailettes de refroidissement garantit une thérapie laser efficace. Le grand écran couleur riche en contrastes facilite le réglage de tous les paramètres - la puissance du laser, le mode de fonctionnement, la durée de la thérapie et la dose de traitement sont affichés sur l'écran couleur avec un contraste maximal.




LOGICIEL DE PRÉCISION

Les paramètres du laser peuvent être réglés individuellement. Neuf séries de fréquences éprouvées, 16 bandes FI (autorun) et 5 balayages (autorun) sont préprogrammés. Des fréquences supplémentaires peuvent être librement choisies et mémorisées.



ADAPTATEUR INTERCHANGEABLE

Pour une manipulation rapide et hygiénique. Pour les applications spéciales, différents adaptateurs sont disponibles (adaptateur de peigne, adaptateur de joint, adaptateur de point). Le PowerTwin XP5 peut être installé en quelques secondes.

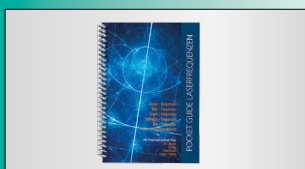

LIVRET

Guide de poche sur les fréquences laser - un livre de traitement avec de nombreux exemples d'indications est inclus.

QUALITÉ MKW GARANTIE

- Plus de 40 ans d'expérience – Innovation et savoir-faire !
- Fabricant livetec Ingenieurbüro GmbH, Lörrach
- Fabrication certifiée et homologation UE
- Distribution exclusive MKW Lasersystem GmbH
- Conseillers scientifiques qualifiés dans de nombreux domaines spécialisés
- Documentation technique complète
- Webinaires et séminaires avec des intervenants de haut niveau
- Formation et accompagnement personnalisés par des collaborateurs MKW agréés



INTERESTED?

Demandez le matériel d'information à www.mkw-laser.de

MKW Lasersystem GmbH | Landstraße 67 | 76547 Sinzheim/Baden-Baden | Allemagne
Tel: +49 7221 988 391 | mkw@mkw-laser.de | www.mkw-laser.de

MKW
LASERSYSTEM